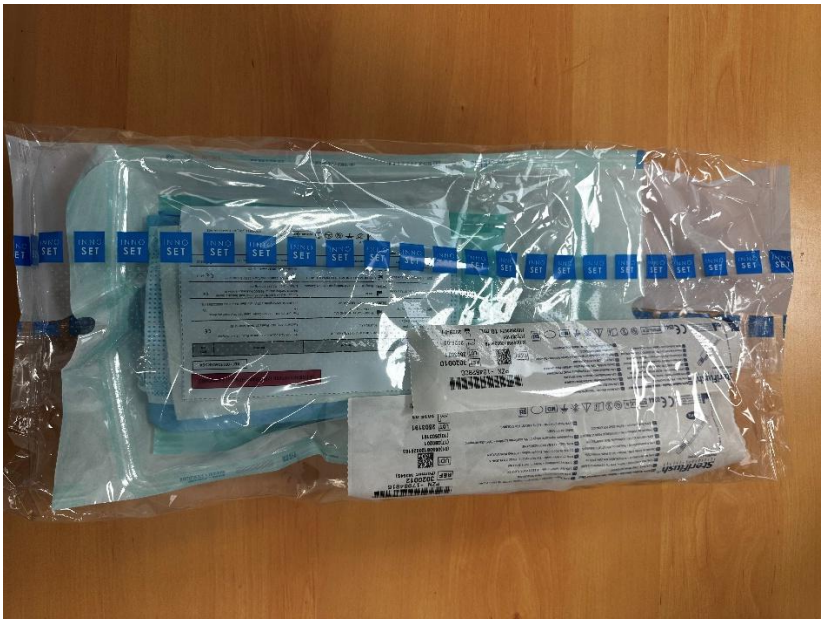
INNOSET
www.innoset.com
ZI de la Masquère - 840 rue de l'Hers – 31750 ESCALQUENS
SIEGE SOCIAL : 75, rue Cuvier - 69 006 LYON
SAS au capital de 500 000 € - RCS Lyon 325 612 042

FSN Réf : 2026-01B

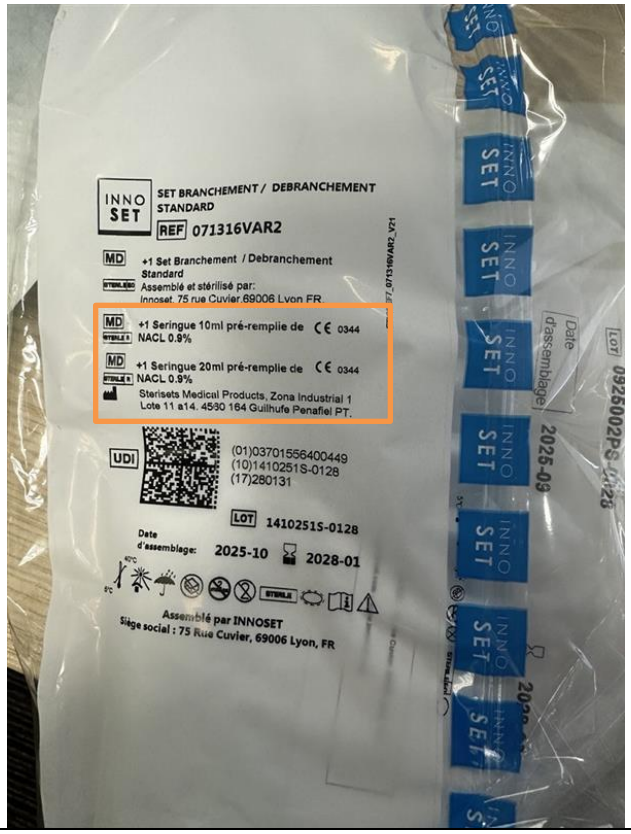
Annexe D

Instruction d'utilisation du sous-ensemble assemblé et stérilisé par Innoset avec une seringue NaCl 0.9% fournie en satellite par Innoset/Kélis médical Apotecnia

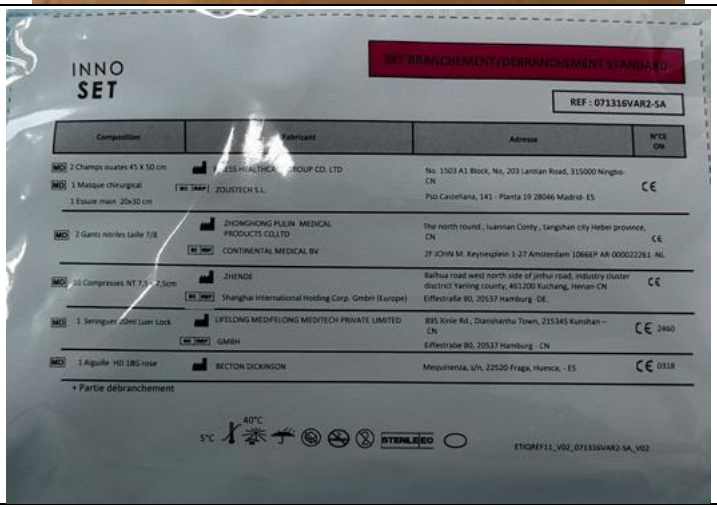
Exemple de set de soins conditionnés avec une ou deux seringues de NaCl 0.9%



INNOSET
www.innoset.com
ZI de la Masquère - 840 rue de l'Hers – 31750 ESCALQUENS
SIEGE SOCIAL : 75, rue Cuvier - 69 006 LYON
SAS au capital de 500 000 € - RCS Lyon 325 612 042

Identification du set contenant une ou deux seringues Stériflush NaCl 0.9% (information disponible sur le suremballage du set), voir photo en exemple ci-contre	
Ouverture du suremballage par un professionnel de santé habilité selon les procédures internes de l'établissement	
Retrait et mise à l'écart de la ou les seringues Stériflush NaCl 0.9% en la conservant dans son emballage d'origine Toute seringue écartée doit être détruite, un certificat de destruction sera fourni à INNOSET pour établissement d'un avoir.	
Destruction du suremballage	

INNOSET
www.innoset.com
ZI de la Masquère - 840 rue de l'Hers – 31750 ESCALQUENS
SIEGE SOCIAL : 75, rue Cuvier - 69 006 LYON
SAS au capital de 500 000 € - RCS Lyon 325 612 042

Conservation du sous-ensemble stérile	
Utilisation du sous-ensemble stérile conformément à son usage prévu tel que mentionné sur son étiquette composition	
Données d'identification et de traçabilité (référence, n° lot, date d'assemblage et date de péremption) disponibles sur l'étiquette du set de soins.	
Remplacement par une (ou deux) seringues stérile équivalente provenant d'un fabricant qualifié et mises à disposition par Innoset / Kélis Médical Apotecnia	